

# DynaTREK

1A600

**ENERGY STORAGE  
AND RETURN FOOT**




2019年度4月 新規完成用部品

受託報酬価格 ￥283,100

 **JAPAN  
PROTEOR**

*Human First*

150 kg

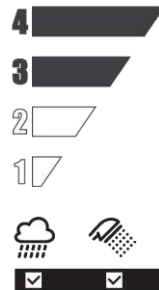

DynaTREK



DynaTrekは中活動から高活動のユーザー向け足部として開発されました。DynaTrekは斜面、階段などどんな地形でも滑らかに安定して歩行することができます。

- 上部カーボンブレードと下部カーボンキールが歩行中にエネルギーの蓄積と放出を行うことで、前方への推進力を生みだし、滑らかな踏み返しを行います。
- 前足部がスプリット構造になっているので、傾斜面、凸凹の路面に対応します。
- 2種類のウェッジでヒールの硬さ調整を行うことができます。  
※ウェッジの硬さは赤色がミディアム、黄色のウェッジがハードになっています。
- 防水:海でも使用可能です。※海で使用した後は真水ですすいでください。
- 体重制限:150kg

品番	モジュール	左右	サイズ	実長	組立長
1A600-**-	1~4	G(左)、D(右)	22~25cm	170mm	154mm
1A600-**-	1~6	G(左)、D(右)	26~30cm	180mm	164mm

品番の記載例 Dyna Trek-モジュール3-右側(D)-25cm 1A600-3D25  
おおよその重さ 25cmの場合 400g(フットシェルを含めない重量)

表1、体重と活動度からみたモジュール選択表

活動度/体重	45~59kg	60~74kg	75~89kg	90~104kg	105~124kg	125~150kg
ノーマル	1	2	3	4	5	6
高活動	2	3	4	5	6	-

表2、足部サイズと使用可能なモジュール表

サイズ/モジュール	1	2	3	4	5	6
22cm	○	○	○	○	-	-
23cm	○	○	○	○	-	-
24cm	○	○	○	○	-	-
25cm	○	○	○	○	-	-
26cm	○	○	○	○	○	○
27cm	○	○	○	○	○	○
28cm	○	○	○	○	○	○
29cm	○	○	○	○	○	○
30cm	○	○	○	○	○	○



付属品としてフットシェルと足部ストッキングネット、コネクションプレートが含まれています。

JAPAN PROTEOR

Human First

お問い合わせはこちらまで  
株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 神戸市ものづくり工場C棟 503

TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 URL: <https://proteor-japan.jp/>