

SHOCKING
ABSORPTION
EFFORTLESS
MOMENTUM


SHOCKWAVE™

ショックウェーブ

"EnduraCore®" って？

カーボンファイバー

カーボンファイバーと
グラスファイバーの "Mix" 素材

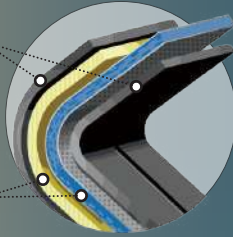

ShockWave に使われている **EnduraCore®** は **PROTEOR** によって開発されました。カーボンファイバーとグラスファイバーを組み合わせた革新的な素材です。カーボンファイバーの **推進力** とグラスファイバーのしなやかな **柔軟性** を兼ね備えています。



ショックアブソーバー搭載
断端にかかる "衝撃" を低減



トルクアブソーバー(±15°)搭載
シームレスな "回旋" を実現



ポルトレスデザイン
滑らかでパワフルな踏みかえしが可能

【完成用部品情報】 足部 - A SACH足部 - SACH - プロテオール F20

品番	F20
サイズ	23 - 30cm (サンダルトゥ 28cm まで)
重量	897g (25cm)
差高	10mm
組立長	176mm (23 - 25cm) 189mm (26 - 28cm) 200mm (29 - 30cm)



スプリットキールで
"内外反" に対応

活動度	体重 (kg)	44 - 52	53 - 59	60 - 68	69 - 77	78 - 88	89 - 100	101 - 116	117 - 130	131 - 147
低		1	1	2	3	4	5	6	7	8
中		1	2	3	4	5	6	7	8	-
高		2	3	4	5	6	7	8	-	-



A D D 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通 1 - 2 - 25 神戸市ものづくり工場 C 棟 503
T E L 078 - 515 - 6663 F A X 078 - 515 - 6689 U R L <https://proteor-japan.jp/>

