

ETHOS™ LP

LOW PROFILE IN HIGH GEAR

力強く耐久性に優れた足部が
－ 期待を超える －
低床設計における強度と性能の新基準




LP3 : エソス




LP3-P : エソス 小児用

ETHOS™ LP

FUSIONFLEX COMPOSITE TECHNOLOGY

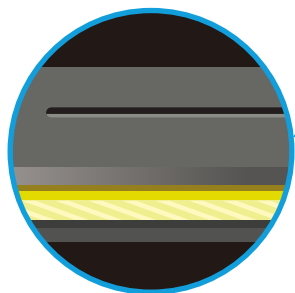


グラスファイバーの耐久性と
カーボンファイバーの反発力を
両立させた3層複合構造

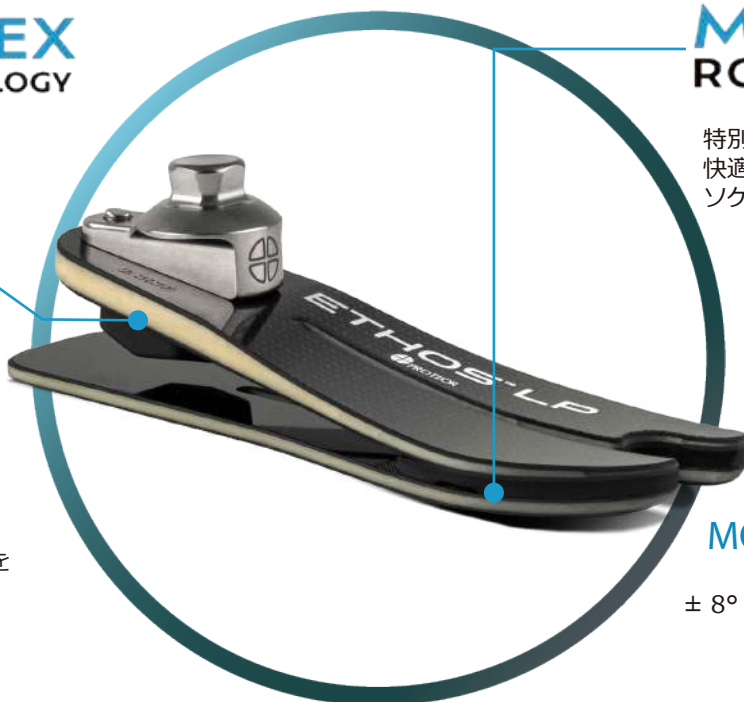

MULTIAXIAL ROTATION PLATE

特別なゴム素材の多軸回転プレートが
快適性・動きやすさを高め、
ソケット内における回旋の負荷を軽減

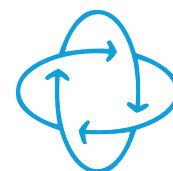


MOVEMENT MADE EASY

± 8° 内旋・外旋 ± 16.5° 内反・外反

製品情報

品番	活動レベル	重量*	サイズ / 組立長	指股	差高
LP3	K3	485g	22 - 25 cm / 57 mm 26 - 28 cm / 58 mm 29 - 30 cm / 63 mm	有	10mm
LP3 - P	K4	275g	19 - 21 cm / 42 mm	無	

* 26cm Cat 4, 20cm Cat 2P, フットシェル含む

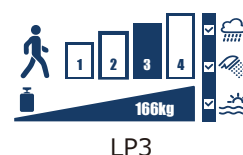

LP3



LP3 - P

LP3 カテゴリー表

活動度 / 体重 (kg)	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
高	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-

LP3 - P カテゴリー表

活動度 / 体重 (kg)	< 26	26-36	36-45	46-60
高	1P	2P	3P	4P

フットシェルカラー



ライト / ミディアム / ダーク / ジェットブラック



A D D 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通 1 - 2 - 25 神戸市ものづくり工場 C 棟 503
T E L 078 - 515 - 6663 F A X 078 - 515 - 6689 U R L <https://proteor-japan.jp/>

